

More performance
in a modern design

ニュー
モデル



POINT 1

3 倍～15 倍までズーム式拡大
拡大 / 縮小ボタンが付いてより便利に！

POINT 2

USB Type-C 搭載
充電や PC で画像の確認が可能

POINT 3

コントラストモードが 14 色
読みやすい色に設定可能


POINT 4

マイクロ HDMI ポート搭載
大画面で表示可能

人間工学に基づいたスタイリッシュデザイン、より使いやすくなった新モデル



片手で使える洗練されたデザイン

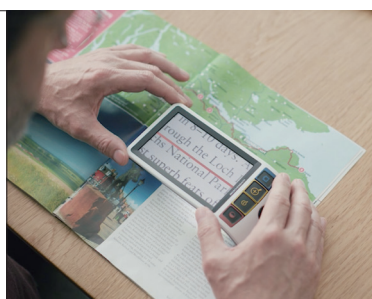

読書ライン / マスク機能が追加



ブルーライトカットモード搭載



書き込みがしやすいスタンド角度

簡単操作で書き込みもしやすいと大人気のスマートルクスが新しくなりました。直感的に使えるボタンはそのままに、14 色から選べるコントラスト、読書ラインなどの機能が増え、よりユーザー好みの設定が可能になりました。

また、新たに搭載したフル HD カメラにより、鮮明な画像と深い被写界深度を実現。さらに、マイクロ HDMI アウトプットを搭載し、大画面での表示が可能になり、USB - タイプ C ポートでは PC に接続し、充電や画像の管理ができるようになりました。

扱いやすさはそのままに、誰にでも扱いやすい拡大読書器です。

3～15x

スマートルクスデジタル 2

No.1650-2 ￥198,000 (非課税)

JAN 4064158 061630

付属品：ハードケース、充電器、ストラップ

2 年保証つき

【輸入 / 販売元】

株式会社エッセンバッハ光学ジャパン

〒101-0048 東京都千代田区神田 司町 2-15-4
TEL03-3293-8570 FAX03-3293-8276

E-mail:toiawase@eschenbach-optik.co.jp
http://www.eschenbach-optik.co.jp

書きやすさ、見やすさを追求しデザインにもこだわった携帯型拡大読書器 倍率の幅が広がり、読書ラインの追加や USB/HDMI 接続が追加 より使いやすい拡大読書器になりました




手持ちで



フロントボタンは直感的に使える最小限の機能を配置。凹凸感がある大きなボタンは作業中でもラクラク操作。



対象物に
載せて

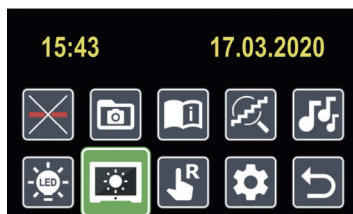

メニューボタンから様々な機能を予め設定しておくことができます。コントラスト、拡大モード、音や明かりの設定、読み取りラインの表示などユーザーに合わせたカスタマイズが可能です。



メニューボタン

書類等
書き込み
に使用



右再度の USB ポートから充電用 USB ケーブルを使って PC に接続が可能。本体に保管した写真の書き出しや、ファームウェアの更新ができます。



Micro-HDMI 出力機能により、拡大画像をテレビなど外部モニターに映し出すことができます。
(外部機種によっては接続できない場合もあります)
※ケーブルは別売です



USB Type-C 充電ポートを搭載。外出先でもスマートフォン用携帯型バッテリーからの充電が可能となり利便性がアップしました。



左利きモードで左手での操作も可能

オプション のご紹介



1650-204

ハンドル
3,630 円 (税込)
[4064158-061661]




1650-208

バンパー
3,630 円 (税込)
[4064158-061654]



エッセンバツハは
日本ロービジョン学会の賛助会員として
認知・普及に努めています

助成制度のご案内

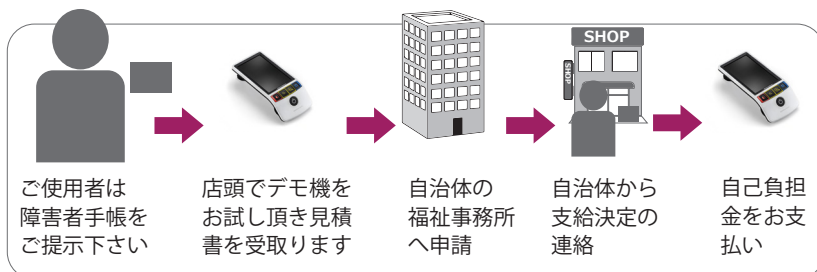

※詳しくは販売店にご相談下さい。 ※助成を受けられない場合もございます。

お問い合わせ

スペック

画面：5 インチ液晶モニター

倍率：3 倍～ 15 倍

カラー切替え：カラー・コントラスト 14 種類

充電時間：約 3.5 時間

連続使用時間：約 3 時間

サイズ：185×43×88mm

重さ：約 240 g

付属：ハードケース、充電器、ストラップ

品番：16502

JAN：4064158-061630

価格 ￥198,000 (非課税)